

H1SX RA a RAL




Vyskúšajte aspoň raz tvrdokovové guličky s krížovým britom do klasiky od firmy NTI ! Preparácia nebola doteraz taká jednoduchá, rýchla a príjemná pre pacienta a lekára !

Guličky H1SX majú na rozdiel od bežných guličiek brit vedený dvoma smermi – do kríža. Bežné guličky majú brit vedený len jedným smerom.

Výhody krížového britu guličiek H1SX:


- vysoká životnosť
- veľmi kl'udný chod, nástroj „nevyskakuje z kavity“
- perfektný záber
- rýchle, šetrné a presné ošetrovanie pacienta

Guličky H1SX majú ešte ďalšiu technickú výhodu oproti bežným guličkám !

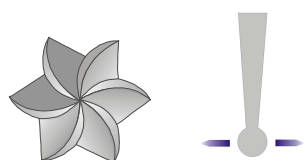

Bežná gulička

Brit bežných guličiek sa zbieha na hrote nástroja do jedného bodu a preto nástroj nemá dobrý záber na dne kavity !

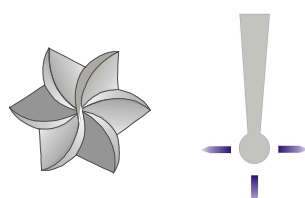

H1SX

Gulička H1SX má jeden brit na hrote vystúpený nad všetky ostatné a preto má vynikajúci záber na dne kavity !



RA ø 2,35 mm

← 22 mm →




RAL ø 2,35 mm

← 26 mm →



new

H1SX

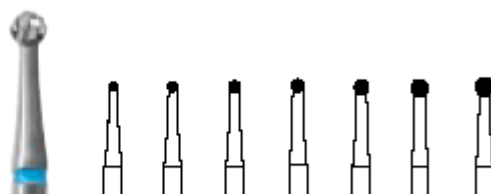

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Länge-Length in mm-longueur							
RA	010	012	014	016	018	021	023
RAL		012	014	016	018	021	023

Obj. kód: H1SX RA ... alebo H1SX RAL ... , ... doplňte veľkosť

Odporúčané otáčky 50.000 ot./min.

EUR  **DENT**

Tigria 10, 040 01 Košice
www.eurodent.sk

0903 774 933, 0915 914 038
E-mail: eurodent@t-zones.sk